



Minden, amire szüksége van.



SUPERLITE POWER PEN

a terméket a 303. oldalon találja



KAPSZULAKEVERŐ

a terméket a 306. oldalon találja



SUPERLITE COLOR PEN

a terméket a 302. oldalon találja



Turbinák	292 - 293
Kézi- és könyökdarabok	294 - 295
Intraorális homokfúvók	296 - 297
Kézidarabok ápolása, tisztítása	297 - 298
Mikromotorok gépi gyökércsatorna tágításhoz	298 - 300
Gyökércsatorna mérőeszközök (apexlokátorok)	301
Gépi gyökércsatorna öblítés	302
Polimerizációs lámpák	302 - 305
Keverőgépek	306
Fóliahegesztő készülékek	307
Hőlégenderilizátorok, autoklávok	308 - 310
Ultraszónus tisztítók	310
Sebészeti készülékek	310 - 311
Egyéb készülékek, eszközök	312 - 313

Turbinák



Ti-Max Z900KL



Ti-Max Z800KL



Ti-Max Z900SL



Ti-Max Z800SL


Kiváló minőség,
nagyszerű ár!


ÚJDONSÁG

Ti-Max Z turbinák (NSK)

Titánból készült, különösen egyenletes forgású, 135°C-ig autoklávozható, fényes prémium turbinák. Az új fejlesztésű rotorok teljesítménye (standard fejméret esetében) 26 W. Az optimalizált csapágnak köszönhetően a turbina élettartama a korábbi modellekének duplája. A Duragrip bevonat biztos fogást biztosít. Négyeszeres hűtés. A Clean Head rendszer megakadályozza a spray és egyéb folyadékok visszaszívását a turbinába. A mikroszűrő meggátolja a spray-csatornak eldugulását. A vékony nyaknak köszönhetően kiváló a rálátás a munkaterületre. **Standard fej:** fordulatszám: 320.000 - 400.000 fordulat / perc, fejtátmérő: 12,5 mm, fejmagasság: 13,1 mm. **Mini-fej:** fordulatszám: 360.000 - 440.000 fordulat / perc, fejtátmérő: 10,8 mm, fejmagasság: 12,1 mm. Garancia: 2 év

KaVo Multiflex kuplunghoz:			
798 882	Z900KL standard fej	1 db	315.000
798 880	Z800KL mini fej	1 db	315.000
Sirona kuplunghoz:			
798 883	Z900SL standard fej	1 db	315.000
798 881	Z800SL mini fej	1 db	315.000

S-Max M turbinák (NSK)

A S-Max M turbinacsalád megújul: új dizájn kívül és belül, még jobb tapintás, még több erő. A vékony, ergonomikusan kialakított nemesacél műszer test kényelmes fogást és kitűnő rálátást biztosít a munkaterületre. A szabadalmaztatott Clean-Head rendszer megakadályozza bármilyen folyadék vagy szennyeződések bejutását a fejbe, meghosszabbítva ezzel a csapágyak élettartamát. A kerámia csapágyak nagy stabilitást és vibrációmentes munkavégzést biztosítanak. A befogók kialakítása biztos fűrőtartást eredményez. A négyeszeres spray optimálisan hűti a fűrőt. A rotorok egyszerűen és időtakarékosan a praxisban cserélhetők. Garancia: 24 hónap.

KaVo kuplunghoz:			
759 015	S-Max M800KL mini-fej, Ø 10,6 x 12,5 mm	1 db	229.000
KaVo kuplunghoz:			
759 016	S-Max M900KL standard-fej, Ø 12,1 x 13,5 mm	1 db	229.000
Sirona kuplunghoz:			
759 017	S-Max M800SL mini-fej, Ø 10,6 x 12,5 mm	1 db	229.000
Sirona kuplunghoz:			
759 018	S-Max M900SL standard-fej, Ø 12,1 x 13,5 mm	1 db	229.000
W+H kuplunghoz:			
243 861	S-Max M900WL standard-fej, Ø 12,1 x 13,5 mm	1 db	229.000

LED-Kuplung (NSK)

A LED nappali fényrel egyenértékű látási körülményeket biztosít szemben a halogén fényrel. Tartósabbak és használatuk biztonságosabb is, mert kevesebb hőt adnak le mint a halogénlámpák. KaVo turbinákhoz, illetve KaVo csatlakozású NSK turbinákhoz.

698 867	KCL-LED kuplung NSK-PTL-hez	1 db	124.000
---------	-----------------------------	------	---------

MASTERtorque M9000L (KaVo)

Különösen nagy teljesítményű fényes turbina kisméretű fejjel, rendkívül halk működéssel és direkt-stop-technológiával. Jellemzői: fejméret 13,1 mm, fejtátmérő: 12,5 mm, teljesítmény 23 Watt, visszaszívógátló, direkt-stop-technológia (utánfutás 1 másodperc), 4-szeres sprayhűtés, halk, vibrációmentes működés (57 dB(A)), kerámia golyóscsapágy, erős Plasmatec-felület, cserélhető spray-microfilter, fényvezető (25.000 Lux), 135 °C-ig autoklávozható. Garancia: 24 hónap.

182 899	MASTERtorque M9000L	1 db	429.000
---------	---------------------	------	---------

EXPERTtorque E680 L (KaVo)

Új, még korszerűbb turbina szeria az alábbi tulajdonságokkal: könnyen tisztítható és mégis biztos fogású EXPERTgrip-felület, cserélhető spray-mikroszűrő és nagyon csekély visszaszívó hatás. 18 Watt-os erőátvitelnek köszönhetően a munka gyors és hatékony (380.000 ford./perc). A kerámia golyóscsapágy rendkívül halk és vibrációmentes munkavégzést biztosít. Az optimális hűtésről 4 fűvóka gondoskodik. A kicsi fejnek (magasság: 13,6mm / átmérő: 12,5mm) és a speciális könyökív / szögkialakításnak köszönhetően könnyebben hozzáférhetünk a munkaterülethez, a 25.000 lux teljesítményű fényvezető megfelelő megvilágítást nyújt. Thermodezinfektorba is helyezhető és 135 °C-ig autoklávozható. Garancia: 18 hónap.

282 841	EXPERTtorque E680 L	1 db	295.000
---------	---------------------	------	---------

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Multiflex kuplungok (KaVo)

082 850	465 RN kuplung, 4-lyukas normál csatlakozó, sprayszabályozó	1 db	87.000
082 861	465 LRN kuplung, 4-lyukas normál csatlakozás (Midwest), sprayszabályozó, visszacsapó szelep tartálék izzó Intra Lux motorokhoz és	1 db	149.000
182 853	Multiflex Lux kuplungokhoz, autoklávózható	1 db	7.995
082 888	465 LED kuplung	1 db	159.000



465 LRN / 465 RN kuplungok

Pótizzó

Sterilizálható izzó, Intra Lux motorokhoz és Multiflex Lux kuplungokhoz.			
082 865	nagynyomású izzó K 504	1 db	7.295



Kiváló minőség, egyszerű ár!

Synea Fusion turbina (w&h)

Gazdaságos új turbina család. A LED+ világítás optimális látási viszonyokat biztosít a munkaterületen. Előnyök: tökéletes munkaterület megvilágítás; nehezen elérhető helyeken is könnyű hozzáférést és jó láthatóságot biztosító optimális fejméret; 4-szeres spray a tökéletes hűtés érdekében; kerámia csapág, csendes vibrációmentes üzem; egyszerű nyomógombos fűrócsere. A turbina kialakítása biztos fogást és könnyű tisztíthatóságot biztosít. Autoklávózható. Garancia 12 hónap.

359 080	TG-97L: Roto-Quick-csatlakozás, Ø fej 10 mm, nyomaték 16W, LED+	1 db	289.000
359 081	TG-98L: Roto-Quick-csatlakozás, Ø fej 11,5 mm, nyomaték 19W, LED+	1 db	289.000
359 082	TG-97LM: Multiflex-csatlakozás, Ø fej 10 mm, nyomaték 16W, kompakt fényvezető	1 db	289.000
359 083	TG-98LM: Multiflex-csatlakozás, Ø fej 11,5 mm, nyomaték 19W, kompakt fényvezető	1 db	289.000


Roto Quick kuplungok (w&h)

198 835	Roto Quick RQ-34 kuplung: fényes kuplung spray-szabályzóval és visszaszívásgátlóval Synea és Toplight turbinákhoz	1 db	105.000
198 872	Roto Quick RQ-24 kuplung: fényes kuplung visszaszívásgátlóval Synea és Toplight turbinákhoz	1 db	90.000
198 847	nagynyomású pótizzó 22076 K 516 (pótégő): Toplight-turbinákhoz 896, 898, 898-LE, T98 L, TA98	1 db	7.995


Akár 7% automatikus kedvezmény

 20.000 forint
feletti rendelés

Ingyenes szállítás

 50.000 forint
feletti rendelés

2% kedvezmény

 100.000 forint
feletti rendelés

3% kedvezmény

 200.000 forint
feletti rendelés

4% kedvezmény

 300.000 forint
feletti rendelés

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházás megrendelések esetén)

2% kedvezmény

4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény

7% kedvezmény

Kézi- és könyökdarabok



Ti X95L



Ti X25L



Ti X15L



Ti X10L



Ti X65L

Ti-Max X fényes kézi- és könyökdarabok (NSK)

Titán, nyomógombos, fényes könyökdarab. A titán anti-allergén és biokompatibilis, így hosszú élettartamot jelent. A DURACOAT bevonat sima, karcmentes felületet és kényelmes használatot jelent. Vibrációmentesen és halkan működik. A fejrészen található, szabadalmaztatott Clean-Head-System megakadályozza a folyadék és csírák bejutását, így megnöveli a kerámia golyóscsapágy élettartamát, és a legjobb higiénikus feltételeket biztosítja. A fényvezető vékony szál (üvegszáloptika) teljesítménye 25.000 Lux. 135°C-ig autoklávozható.

917 826	Ti X25L könyökdarab, 1:1	1 db	239.000
917 825	Ti X95L gyorsító könyökdarab, négyszeres hűtés, 1:5	1 db	329.000
917 827	Ti X15L lassító könyökdarab, 4:1	1 db	269.000
598 843	Ti X10L lassító könyökdarab, 16:1	1 db	305.000
598 844	Ti X65L kézidarab, 1:1	1 db	265.000



S-Max M95L



S-Max M25L



S-Max M15L



S-Max M65

S-Max M kézi- és könyökdarabok (NSK)

A S-Max M kézidarab család megújul: új dizájn kívül és belül, még jobb tapintás, még több erő. A vékony, ergonomikusan kialakított nemesacél test kényelmes fogást és kitűnő rálátást biztosít a munkaterületre. A szabadalmaztatott Clean-Head rendszer megakadályozza bármilyen folyadék vagy szennyeződés bejutását a fejbe, meghosszabbítja ezzel a csapágyak élettartamát. A darabok a felhasználó számára nagy stabilitást és vibrációmentes munkavégzést biztosítanak. A befogók kialakítása biztos fűrőtartást eredményez. A gyorsító könyök négyszeres spray hűtése - magas fordulatszám mellett is - optimálisan hűti a fűrőt. Garancia: 24 hónap.

613 157	S-Max M25L könyökdarab 1:1 (fény nélkül)	1 db	155.000
513 440	S-Max M95 gyorsító könyökdarab 1:5 (fény nélkül), négyszeres spray, kerámia csapágy	1 db	210.000
713 160	S-Max M15L lassító könyökdarab 4:1 (fény nélkül)	1 db	175.000
698 893	S-Max M65L kézidarab 1:1 (fény nélkül)	1 db	145.000
698 891	S-Max M25L fényes könyökdarab 1:1	1 db	199.000
698 890	S-Max M95L fényes gyorsító könyökdarab, négyszeres spray, kerámia csapágy 1:5	1 db	255.000
698 892	S-Max M15L fényes lassító könyökdarab 4:1	1 db	229.000

Akár 7% automatikus kedvezmény

**20.000 forint
feletti rendelés**

Ingyenes szállítás

**50.000 forint
feletti rendelés**

2% kedvezmény

**100.000 forint
feletti rendelés**

3% kedvezmény

**200.000 forint
feletti rendelés**

4% kedvezmény

**300.000 forint
feletti rendelés**

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházás megrendelések esetén)

2% kedvezmény

4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény

7% kedvezmény

EXPERTmatic (KaVo)

Új, még korszerűbb rendszer az alábbi tulajdonságokkal: könnyen tisztítható és mégis biztos fogású EXPERTgrip-felület, cserélhető microfilter (E 25 L), minimális zaj és vibráció működtetés közben, belső hűtés, a munkaterület ideális megvilágítása 25.000 Lux erősséggel. Thermodezinfektorba is helyezhető és autoklávozható 135 °C-ig. Garancia: 18 hónap.

Fényes:

282 846	EXPERTmatic E20 L, 1:1, könyök befogó	1 db	249.000
282 845	EXPERTmatic E25 L, 1:5, turbina befogó	1 db	329.000
282 847	EXPERTmatic E15 L, 5,4:1, könyök befogó	1 db	259.000

Fény nélküli:

282 851	EXPERTmatic E10 C, 1:1 kézidarab	1 db	159.000
---------	----------------------------------	------	---------



E25L



E20L



E15L



E10C

Synea Fusion kézi- és könyökdarabok (W&H)

Új, gazdaságos kézi- és könyökdarab széria. A kerámia csapágó vibrációmentes működést és hosszú élet-tartamot biztosít. A kisméretű fej optimális rálátást, a 4-szeres spray biztonságos hűtést nyújt. A kompakt fényvezető optimálisan megvilágítja a munkaterületet. Az új kialakításnak köszönhetően a darabok könnyen tisztíthatók, fogásuk biztos. A beépített, karbantartást nem igénylő vízszűrő a legjobb vízminőséget biztosítja. Autoklávozhatók, garancia 24 hónap.

WG-99LT gyorsító könyökdarab:

359 085	1:5, turbina befogó, fényes	1 db	345.000
---------	-----------------------------	------	---------

WG-56LT könyökdarab:

359 086	1:1 könyökdarab befogó, fényes	1 db	238.000
---------	--------------------------------	------	---------

WG-66LT lassító:

359 087	2:1, könyökdarab befogó, fényes	1 db	279.000
---------	---------------------------------	------	---------

WG-99A gyorsító könyökdarab:

359 088	1:5, turbina befogó, fény nélküli	1 db	262.000
---------	-----------------------------------	------	---------

kézidarab HG-43A:

359 089	1:1, fény nélküli	1 db	175.000
---------	-------------------	------	---------



WG-99LT



WG-56LT



WG-66LT



WG-99A



HG-43A

RECIPROC direct könyökdarab (VDW)

Az első reciproc mozgásra alkalmas könyökdarab. A RECIPROC direkt könyökdarabot - külön endomotor használata nélkül - egy mozdulattal kezelőegysége mikromotorjára csatlakoztathatja, megteremtve ezzel az egyszerű és gyors egytűs reciproc endo kezelés lehetőségét.

RECIPROC direct blue induló készlet (25 mm):

1 Reciproc direct könyökdarab, 2 x 6 Reciproc blue R25,

1 x 6 Reciproc blue R40, 1 x 6 Reciproc blue R50,

1 spray fúvóka

359 629		1 csomag	429.000
---------	--	----------	---------



Intraorális homokfúvók



PROPHYflex 4 (KaVo)

Intraorális homokfúvó sub- és supragingivális kezelésekhez. A kifújt por mennyisége 3 fokozatban, közvetlenül a kézidarabon állítható. A pormennyiség alacsony töltöttség mellett is állandó marad. Az új kanülrendszer precíz porsugarat biztosít, egyúttal minimalizálja a kialakuló spray felhőt, így a kezelő tökéletesen rálát a munkaterületre. A kézidarab szára 360 fokban elforgatható, lehetővé téve ezzel a kényelmes és ergonomikus munkavégzést a nehezen elérhető helyeken is. A supra- és subgingivális kezelés, valamint az implantátum tisztítás egy kézidarabbal megoldható. Elegendő felhelyezni a perio kanült, perio port tölteni a tartályba és kézidarabot a szükséges középső fokozatba állítani. A mélységjelzéssel ellátott vékony perio kanülok kitűnő hozzáférést, jó rálátást és célzott tasaktisztítást tesznek lehetővé. A higiénikus perio végződés 10 alkalommal használhatóak. A rendszer valamennyi eleme termodezinfektóban fertőtleníthető és autoklávban sterilizálható. Garancia: 1 év

PROPHYflex 4, KaVo csatlakozással:

kanül két hosszban, portartály, gumi tartálytető (supragingivális, türkiz), tisztító fúró, tisztító tű, kulcs a kanülok rögzítéséhez, O-gyűrű készlet:

282 000	kék (Wave)	1 csomag	445.000
282 001	lime	1 csomag	445.000
282 002	flamingó	1 csomag	445.000

PROPHYflex 4 S, Sirona csatlakozással:

kanül két hosszban, portartály, gumi tartálytető (supragingivális, türkiz), tisztító fúró, tisztító tű, kulcs a kanülok rögzítéséhez, O-gyűrű készlet:

282 003	kék (Wave)	1 csomag	445.000
282 004	lime	1 csomag	445.000
282 005	flamingó	1 csomag	445.000

Perio készlet subgingivális biofilm eltávolításra, valamint implantátumok, koronák és hidak tisztítására:

3 perio végződés, 1 kulcs a periovégződés rögzítéséhez, 1 tisztító tű, 1 adapter perio végződéshez, 2 portartály, 2 gumi tartálytető (subgingivális, pink),

282 011	20 g PROPHYflex Perio por	1 csomag	125.000
140 499	1 kulcs a periovégződés rögzítéséhez, 1 tisztító tű	1 csomag	83.395
282 006	rövid szár	1 db	18.395
282 007	kanül	1 db	62.445
282 008	portartály	1 db	7.335
282 009	gumi tartálytető (supragingivális, türkiz)	1 db	2.095
282 012	gumi tartálytető (subgingivális, pink)	1 db	2.095
113 176	tisztító tű	1 db	2.365



Prophy-Mate neo (NSK)

Könnyű, kompakt, egyszerűen kezelhető kézidarab fogtisztításhoz és fogpolírozáshoz. A kézidarab ergonomikus súlyelosztásának és a könnyű portartó kamrának köszönhetően könnyen egyensúlyban tartható. A darab nagy nyomás mellett is 360 fokban forgatható. Az egyedülálló duplafúvóka egyenletesen kiváló polírozást tesz lehetővé. Kiválóan használható professzionális fogtisztításra, lepedékek és elszíneződések eltávolítására, zománc, dentin és kerámia bondozás előtti előkészítésére, barázdazárás előtt. 135°C-ig autoklávozható. Garancia: 1 év.

Prophy-Mate neo: 1 kézidarab 60°- és 80°-os fúvókával, tisztítókefe, fúvókatisztító drót, 5 x 15 g FLASHpearl tisztítópórp, portartó tető, csavarkulcs fúvóka cseréhez

598 053	KaVo Multiflex kuplunghoz:	1 db	315.000
598 054	Sirona kuplunghoz	1 db	315.000
917 020	W+H kuplunghoz	1 db	315.000

Több mint 20.000 termék nagyszerű áron

Válasszon webáruházunk több mint 20.000 cikkszáma közül és takarítson meg további 2%-t online kedvezményünkkel!

Regisztráljon hírlevelünkre online akcióinkért!

www.mwdental.hu



Perio-Mate (NSK)

A subgingivális felhasználásra készült intraorális homokfúvó új távlatokat nyit a parodontitis és a periimplantitis kezelésében, valamint a biofilm kíméletes eltávolításában. A kézidarab két ujjal könnyen forgatható, hozzáférhetővé téve fúvóka számára a nehezen elérhető tasakokat is. A portartályon lévő gyűrű segítségével a kifújt por mennyisége egyszerűen, a kezelés megszakítása nélkül szabályozható. A csomag tartalma: 1 Perio-Mate készülék (kézidarab + portartály), 40 steril, egyszerhasználatos fúvóka, 100 g Perio-Mate por, 1 tisztító készlet, 1 tartalék portartály fedő.

459 052	Perio-Mate W&H csatlakozáshoz	1 db	375.000
459 050	Perio-Mate KaVo csatlakozáshoz	1 db	375.000
459 051	Perio-Mate Sirona csatlakozáshoz	1 db	375.000
	steril, egyszerhasználatos fúvóka		
459 053	Perio-Mate készülékhez, 40 db	1 csomag	32.495



Air Flow Handy 2+ (EMS)

Ergonómikus kialakítású homokfúvó. Nagy portartó, a nagyobb poráramlásnak köszönhetően hatékonyabb a munkavégzés. A kézidarab 134 °C-ig autoklávozható. 1 év garancia.

Air Flow Handy 2+ 120 fokban hajlított fúvókával, zárókupak, karbantartó készlet, 300 g Air Flow:

698 898	Sirona kuplunghoz	1 db	359.000
698 895	KaVo kuplunghoz	1 db	359.000



Airsonic Mini (Hager & Werken)

Könnyen kezelhető homokfúvó készülék koronák, hidak, bracketek, stiftek stb. ragasztási felületeinek felérésítésére. Fémhez és kerámiához egyaránt ideális. Használható továbbá a cementmaradványok eltávolítására koronákról és hidakról. A megfelelő adapter kiválasztásával a kezelőegység kuplungjára vagy labor levegőforrásra csatlakoztatható.

Airsonic Mini homokfúvó készlet:

022 028	homokfúvó 60°-os fúvóka, 20 g alumínium-oxid	1 készlet	81.495
022 085	Adapter Airsonic K (KaVo)	1 db	31.495
022 087	Adapter Airsonic R (W&H Rotoquick)	1 db	33.495
022 086	Adapter Airsonic S (Sirona)	1 db	28.995
022 088	Adapter Airsonic L (labor levegőforráshoz)	1 db	11.995
022 029	Airsonic alumínium-oxid, 500 g: 50 micron	1 csomag	4.425
022 030	Airsonic alumínium-oxid, 500 g: 90 micron	1 csomag	4.425



Kézidarabok ápolása, tisztítása



MŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY

Rozsdamentes acélból készült műszerállvány 3 db turbina és 12 db könyök-, illetve kézidarabhoz.

000 670	M+W műszertartó állvány (itatós alátét nélkül)	1 db	16.995
000 690	további adapter turbinákhoz	1 db	995
082 880	itatós alátét, 100 db	1 csomag	11.495



csak **16.995 Ft**

Olajgyűjtő kendő (Cleanlike)

Olajgyűjtő kendő 100% tiszta pamutból. A turbinák, kézi- és könyökdarabok tisztítása közbeni olajfelesleg felítására. A kendő a tisztítás alatt a tasakban marad, így nem szennyezi a környezetet!

298 077	olajgyűjtő kendő, 50 db	1 csomag	8.325
---------	-------------------------	----------	-------





Cleanpac (KaVo)

Turbinák, kézi- és könyökdarabok tisztításánál előforduló olajfelesleg összegyűjtésére.
10 db/csomag.

082 001	Cleanpac	1 csomag	13.145
---------	----------	----------	--------

Mikromotorok gépi gyökércsatorna-tágításhoz



VDW.SILVER RECIPROC (vdw)

Reciproc mozgásra is alkalmas endomotor Sirona 6:1 lassító könyökdarabbal. Áttekinthető menürendszerének és jól olvasható kijelzőjének köszönhetően kezelése egyszerű. Akku üzemű készülék, töltés közben is használható. Lábkapcsolóval vagy lábkapcsoló nélkül egyaránt üzemeltethető. Az előre beállított Reciproc és Wave One programon felül további 15 NiTi rendszer előírt fordulatszáma és nyomatéka programozható (Dr's Choice program). Garancia: 3 év a motorra, 1 év a kézikönyvre.

VDW.SILVER RECIPROC:			
	1 db VDW.SILVER RECIPROC endomotor,		
128 109	1 db Sirona 6:1 lassítású könyökdarab, 1 db lábkapcsoló	1 csomag	569.000
VDW.SILVER RECIPROC + RECIPROC System kit:			
	1 db VDW.SILVER RECIPROC		
	1 db RECIPROC System Kit 25 mm:		
	(6 db RECIPROC R25 műszer, 3-3 db RECIPROC R40,		
	R50 műszer, 1 db RECIPROC guttapercha sorozat,		
	1 db RECIPROC papírcsúcs sorozat,		
958 689	1 db ENDO gyakorló modell)	1 csomag	599.000



VDW.GOLD RECIPROC (vdw)

Endodonciás motor, integrált hosszmeghatározással: egy készülék a gyökércsatorna hosszának mérésére és a gyökércsatorna preparálására. További tulajdonságaiban megegyezik a VDW.SILVER készülékkel.

VDW.GOLD RECIPROC:			
	1 db VDW.GOLD RECIPROC endomotor,		
058 050	1 db Sirona 6:1 lassítású könyökdarab, 1 db lábkapcsoló	1 csomag	1.045.000
VDW.GOLD RECIPROC + RECIPROC blue 24 Kit:			
	1 db VDW.GOLD RECIPROC,		
	1 db RECIPROC Blue 24 Kit (25 mm): 12db R25, 6db R40, 6db R50		
	RECIPROC Blue műszer, 1 db RECIPROC blue papírcsúcs sorozat,		
	1 db RECIPROC blue guttapercha sorozat,		
359 630	1 db gyakorló modell	1 csomag	1.099.000
113 900	tűtartó csipesz VDW.Gold Reciproc készülékhez (2 db)	1 csomag	27.995
958 699	autoklávozható szilikon burkolat kézikönyvhöz (5 db)	1 csomag	7.945
113 900	tűtartó csipesz VDW.Gold Reciproc készülékhez (2 db)	1 csomag	27.995
113 899	kábel tűtartó csipeszhez	1 db	17.725
213 970	ajakkampó (5 db)	1 csomag	28.665
117 173	kábel ajakkampóhoz	1 db	18.315



A legnagyobb választék a leggyorsabban

- 98% feletti szállítási készség
- a 15 óráig megrendelt áru Budapesten kettő, Budapesten kívül három munkanapon belül átvehető a megadott címen
- ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft rendelési érték felett



VDW.Connect Drive (vdw)

Vezeték nélküli kézidarab, melynek használatakor két lehetőség közül választhat: 1. Amennyiben egy iPad vagy iPad mini készülékre* letölti az ingyenes VDW.CONNECT alkalmazást, az iPad – a Bluetooth kapcsolat keresztül – a készülék vezérlőjévé válik, melyen beállíthatja a reciproc- illetve a folyamatos forgómozgást végző műszerek egyedi felhasználási paramétereit, valamint saját felhasználói profilt alakíthat ki. 2. iPad csatlakoztatása nélkül a kézidarab önmagában is alkalmas a Reciproc rendszer használatára. A kézidarab 5 Ncm forgatónyomatéka a hagyományos Reciproc motorok teljesítményéhez mérhető. Az ergonomikusan kialakított kisfejtű, vezeték nélküli, forgatható kézidarab megnöveli a mozgásszabadságot, kitágítja a látómezőt és könnyebb hozzáférést biztosít a munkaterülethez. A nagyteljesítményű Litium-Ion-akku akár 16 egymást követő beavatkozást tesz lehetővé. A VDW.CONNECT Drive a jövőbeni funkciókra modulárisan bővíthető, updatelhető. Garancia: 12 hónap. * iPad és iPad mini (Bluetooth 4.0 low energy, IOS 8.0 verziótól) készülékekkel kompatibilis.

VDW.Connect Drive:

Kézidarab, könyökfej, hálózati egység, spray adapter kézi olajozáshoz, iPad állvány, egyszerűhasználatos huzatok a kézidarabhoz és az állványhoz

058 060 1 készlet 745.000

VDW.Connect Drive + Reciproc Medium blue készlet:

1 db VDW.Connect Drive
1 db RECIPROC Blue 24 Kit (25 mm): 12db R25, 6db R40, 6db R50 RECIPROC Blue műszer,
1 db RECIPROC blue papírcsúcs sorozat,
1 db RECIPROC blue guttapercha sorozat,
1 db gyakorló modell

359 631 1 csomag 799.000

VDW.CONNECT Drive + Locate Reciproc blue System Kit 24:

1 Connect Drive készülék, 1 Connect Locate készülék,
24 RECIPROC blue műszer 25 mm, steril, 12 x R25, 6 x R40,
6 x R50, 1 RECIPROC blue papírcsúcs sorozat,
1 RECIPROC blue guttapercha sorozat,
1 db gyakorló modell

243 598 1 csomag 999.000

ÚJDONSÁG



Endo-Mate DT (NSK)

Vezetékes és akku üzemmódban egyaránt használható endomotor. A fordulatszám és forgatónyomaték 9 különböző NiTi tűhöz előre programozható. Amennyiben a terhelés ez előre beállított nyomatékokat eléri a motor (a beállításnak megfelelően) leáll, vagy ellenkező irányú fordulatra vált. Lassítás: 20:1. A kézidarab a vezetékkel mindössze 92 gr. Méret (szélesség x mélység x magasság) 92 x 148 x 124 mm.

Endo Mate DT 20:1 lassító könyökkel vezérlőegység,

140 343 20:1 kézidarab tömlővel, kézidarab alátét, hálózati adapter 1 csomag 425.000



Endo-Mate TC2 (NSK)

A könnyen áttekinthető kijelző, az egyszerű, mindössze öt gombos kezelhetőség, a könnyű, vezeték nélküli kézidarab megkönnyítik a legbonyolultabb endodonciai munkát is. Hangjelzés figyelmeztet, amennyiben a terhelés az előre beállított forgatónyomaték határához közelít, így a fej még az Autoreverse (visszafelé forgó) funkció aktiválódása előtt tehermentesíthető. A különböző gyártók, különféle gépi tágító eszközeihez, különböző programok állnak rendelkezésre. A következő paraméterek egyénileg állíthatók: sebesség, forgatónyomaték, a lassítás áttétele, Autoreverse funkció. Az utolsó programbeállítást a készülék kikapcsoláskor eltárolja, és megőrzi az újbóli bekapcsolásig. MPA fejjel használva a kézidarab csatlakoztatható az iPex II apexlokátorhoz.

128 503 Endo-Mate TC2 Csatlakozás nélküli apexlokátor 1 készlet 395.000

128 504 Endo-Mate TC2 Apexlokátor csatlakozással 1 készlet 435.000



TriAuto ZX2 (Morita)

Vezeték nélküli endodonciai motor, mely egy kézidarabban egyesíti a gyökértágítás és a bemérés funkciókat. Automatikus funkciói egyszerű és biztonságos használatot garantálnak. **Auto Start / Stop funkció:** a tágító a gyökércsatorna vezetve automatikusan indul, onnan kivéve leáll. **Apical Reverse funkció:** az előre beállított pontot elérve a tágító megáll és visszafelé forog. **Auto Torque Reverse funkció:** a beállított értéknél nagyobb nyomaték esetén a fogás ellenkező irányúra vált. Auto Apical Slow Down funkció: a gyökércsúcs közelébe érve csökken a fordulatszám így kíméletesebb a preparáció. Garancia: 24 hónap

1 kézidarab, 1 belső tülelektroda, 1 akku, 1 töltő talp,
hálózati csatlakozó, 1 tűcsipesz, 3 nyálkahártya elektroda,

140 478 100 védőhuzat 1 csomag 995.000



ÚJDONSÁG



X-SMART IQ + Propex IQ apexlokátor (Dentsply Sirona)

A gyökércsatorna tágítás legújabb technológiája. Az X-Smart IQ endomotor és a Propex IQ apexlokátor külön készülékként vagy egy rendszerként egyaránt használható. Az X-Smart IQ - vezetékek nélküli motor - forgó és reciprok mozgásra egyaránt alkalmas. A motor vezérlése iPad mini készülékről Apple iOS applikáció segítségével, Bluetooth kapcsolaton keresztül történik. (Az iPad készüléket az ajánlat nem tartalmazza) iPad csatlakoztatása nélkül a motor önmagában is alkalmas a WaveOne Gold rendszer használatára. A tökéletesen egyensúlyozott kézidarab rendkívül kis méretű fejjel rendelkezik, kiváló rálátást biztosítva ezzel a munkaterületre. Az applikációban tárolt egyszerű képek segítségével a tervezett endodonciai kezelés kezelése könnyen elmagyarázható a beteg számára. Az akku kapacitása 16 kezelésre elegendő. Forgatónyomaték (a beállított maximális fordulatszám függvényében) 0,5-5 Ncm. Fordulatszám tartomány: 250-850 fordulat / perc. A kézidarab 134°C-on autoklávozható. Garancia: 12 hónap. A motor kiváló kiegészítője a Propex IQ apexlokátor. A kicsi, könnyen kezelhető készülék segítségével az apex pontosan meghatározható. Az X-Smart endomotorral összekötve - az Endo IQ applikáció segítségével - további funkciók (pl. tágítási cél megadás, Autoreserve funkció) is elérhetőek.

X-Smart IQ Basic S starter Kit: X-Smart IQ kézidarab (motor és kézidarab egyben), 135 356 iPad mini védőtasak 1 csomag 795.000		
X-Smart IQ Starter Kit ProTaper Gold műszerekkel: X-Smart IQ Basic Starter Kit, 3 db ProGlider, 143 539 30 db ProTaper Gold 1 csomag 939.000		
X-SMART IQ Starter Kit WaveOne Gold műszerekkel: X-Smart IQ Basic Starter Kit, tarter Kit, 188 036 3 db WaveOne Gold Glider, 31 db WaveOne Gold 1 csomag 939.000		
X-Smart IQ Starter Kit ProTaper Next műszerekkel: X-Smart IQ Basic Starter Kit, 3 db Pro Glider, 188 037 30 db ProTaper Next 1 csomag 939.000		
Propex IQ Basic Starter Kit: Propex IQ Apex Locator ajakkampóval és tűtartó csipesszel, 188 076 1 Endo IQ állvány 1 csomag 295.000		
X-Smart IQ & Propex IQ Basic Starter Kit: 1 X-Smart IQ kézidarab, Propex IQ Apex Locator ajakkampóval és tűtartó csipesszel, 1 Endo IQ állvány 1 csomag 1.045.000		
X-Smart IQ & Propex IQ Starter Kit WaveOne Gold műszerekkel: 1 X-Smart IQ Starter Kit WaveOne Gold műszerekkel, 188 078 1 Propex IQ Basic Starter Kit 1 csomag 1.075.000		
X-Smart IQ & Propex IQ Starter Kit ProTaper Next műszerekkel: 1 X-Smart IQ Starter Kit ProTaper Next műszerekkel, 188 079 1 Propex IQ Basic Starter Kit 1 csomag 1.075.000		
X-Smart IQ & Propex IQ Starter Kit ProTaper Gold műszerekkel: 1 X-Smart IQ Starter Kit ProTaper Gold műszerekkel, 188 080 1 Propex IQ Basic Starter Kit 1 csomag 1.075.000		
188 081 iPad Mini védőtasak (100 db) 1 csomag 7.995		
188 082 Propex IQ védőtasak (100 db) 1 csomag 8.995		
188 083 Propex IQ mérőkábel 1 db 26.495		
188 084 Propex IQ tűtartó csipesz (2 db) 1 csomag 28.795		
188 085 Propex IQ ajakkampó (5 db) 1 csomag 11.995		

X-SMART Plus (Dentsply Sirona)

Endomotor reciprok- és klasszikus forgómozgásra. 8 programhelyet önállóan programozhatunk a 0,6-4,0 Ncm forgatónyomaték, illetve a 250-1.200 fordulat / perc fordulatszám tartományban. Az egyszerű navigálást a nagyméretű kijelző és az ISO szinkódolt fájl könyvtár segíti. Akkumulátor és hálózati készülékként egyaránt működtethető.

X-SMART Plus: X-SMART Plus motor, 1 kézidarab, 1 X-SMART Plus 6:1 könyökfej, 188 031 1 kézidarabtartó, 1 AC-adapter, 1 nyomtatókártya 1 csomag 629.000		
X-Smart Plus WaveOne Gold Kit (W1GG): 1 X-Smart Plus, 3 x WaveOne Gold Glider, 188 038 31 x WaveOne Gold műszer 1 csomag 765.000		

Gyökércsatorna mérőeszközök (apexlokátorok)

Raypex 6 (VDW)

Az új Raypex 6 egyesíti a pontosságot a lehető legegyszerűbb kezelhetőséggel. Az új multifrekvenciás apexlokátor nedves környezetben is pontos mérési eredményeket garantál. Az „apex zoom” az apikális konstrukció és a foramen apikale közötti szakaszt felnagyítva ábrázolja. A közlekedési lámpáktól kölcsönzött színek egyértelmű információkat nyújtanak. Az egyedülálló 3D hatású színes érintőképernyő egyszerű kezelést biztosít. A display – a két színből és hangjelzésből választva – egyénileg kialakítható. A beépített önellenőrzési funkció gyorsan kontrollálja a készülék és a kábelek állapotát. Az összecsukható készülék rendkívül helytakarékos, súlya mindössze 350 g. Mérete összecsukott állapotban: 101 x 110 x 24 mm.

Kinyitva: 101 x 110 x 97 mm. Akkuról működtethető. Garancia: 1 év (fél év a tartozékokra)

Raypex 6 Kit:

1 Raypex 6 apexlokátor, 1 mérőkábel,
2 százugkampó, 2 tűtartó csipesz, 1 hálózati adapter,

058 006	tartozékok	1 készlet	349.000
058 025	hálózati adapter	1 db	13.575
058 026	mérőkábel	1 db	22.795
058 027	akkumulátor	1 db	13.365
058 009	százugkampó (5db)	1 csomag	25.275
058 008	tűtartó csipesz (2db)	1 csomag	23.995



VDW.CONNECT Locate (vdw)

Extra kis méretű, könnyen kezelhető, nedves környezetben is pontos mérési eredmény adó apexlokátor. Egyértelmű vizuális (LED) és akusztikus jelzést ad. Használható egyedülálló készülékként, vagy - Bluetooth-val a VDW.CONNECT.DRIVE-hoz kapcsolva - a gépi kezelésbe integrálva. Az App Store-ból ingyenesen letölthető VDW.CONNECT.App segítségével - egyedülálló kontrollt biztosítva - megjeleníthető az iPad képernyőjén.

243 584	VDW.CONNECT Locate	1 db	275.000
---------	--------------------	------	---------



ÚJDONSÁG

iPex II apexlokátor (NSK)

Akkuüzemű apexlokátor új „SmartLogic” vezérléssel a gyökércsúcs pontos és precíz bemérésére. Tiszta képet ad a tágitóműszer pontos helyzetéről úgy száraz, mint nedves környezetben. A különböző munkafázisokat különböző hangok jelzik. Kompakt kialakításának köszönhetően rendkívül helytakarékos, közvetlenül a kezelőtálcára helyezhető. A csekély tükröződésű, háromszínű LCD kijelző könnyen áttekinthető. Műszaki adatok: áramellátás: 1,5 AAA akku (LR03 vagy R03), tartós üzem (kb. 60 óra), méretek: 60 x 60 x 86,5 mm, tömeg: 76 g (akku nélkül), garancia: 12 hónap

iPex II apexlokátor:

1 vezérlő egység, 1 mérőkábel, 3 tűtartó csipesz,

259 049	3 ajakkampó, 3 AAA mangán szárazelem	1 készlet	279.000
---------	--------------------------------------	-----------	---------



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

propex pixi (Dentsply Sirona)

Apexlokátor. Progresszív optikai és akusztikus ellenőrzés a hangjelzésnek és a négy különböző hangerősségnek köszönhetően. Száraz és nedves gyökércsatornában is használható. Kalibrálásra és kezdeti beállításra nincsen szükség. Alkalmazása valamint tárolása során is kis helyen elfér, pontos és megbízható. Méret: 66 x 55 x 18 mm, súly: 55 g, kijelző típusa: színes-LED, áramellátás: AAA 1,2 V 1000 mAh NiMH-akkumulátor. 24 hónap garancia, tartozékokra (kábel, akkumulátor stb.) 6 hónap.

propex pixi apexlokátor: 1 töltő, 1 hosszú mérőkábel,

188 050	2 százugkampó, 1 csatlakozó kampó	1 db	239.000
188 052	mérőkábel, rövid (55 cm)	1 db	22.745
188 051	mérőkábel, hosszú (130 cm)	1 db	22.745



Gépi gyökércsatorna öblítés

ÚJDONSÁG



EDDY Endo-öblítőhegyek (vdw)

Innovatív, biztonságos és hatékony három dimenzióban rezgő gyökércsatorna öblítő hegyek. A poliamid hegyek a levegős depurátor rezgésére (6000 Hz) aktiválódnak. Kíméletes a dentinhez, alaposan öblít az erősen görbült gyökércsatornában, komplex gyökéranatómia esetén is. Megbízhatóan eltávolítja a törmelékét és a szövetmaradványokat. A hegyek gyors mozgása során az öblítőfolyadékban gázbuborékok keletkeznek és tűnnek el robbanásszerűen. Az így felszabaduló energia erősíti az öblítés tisztító hatását. (kavitáció). A nagyfrekvenciájú rezgések hatására az öblítőfolyadék örvényszerű mozgásba jön, növelve a falakra ható tisztító erőt. (Acoustic Streaming). A hegyek a következő levegős depurátorokhoz csatlakoztathatók: NSK: Ti-Max S970, S970L, S970KL, S970SL; W&H: ZA-55, ZA-55L, ZA-55M, ZA-55LM, ZA-55LS; KaVo: SONICflex 2003, SONICflex 2003L, Sonicflex 2000N; Sirona: SIROAIR L

Starter Kit:

1 W&H fényes, levegős depurátor Proxeo ZA-55 LM
(Multiflex csatlakozással, teljesítményszabályozó gyűrűvel),

134 819	20 x 2 db steril EDDY öblítő hegy	1 csomag	544.000
134 800	Endo Irrigation Tip: 5 x 2 db steril EDDY öblítő hegy	1 csomag	19.995
159 577	Eddy 100 plus Kit: 60 x 2 db steril EDDY öblítő hegy	1 csomag	193.995

ÚJDONSÁG



EndoActivator (Dentsply Sirona)

Az EndoActivator hidrodinamikusan aktiválja az öblítő folyadékot, jelentősen növelve ezáltal az endodonciai kezelés hosszútávú sikerét. A hidrodinamikus áramlás hatékonyabb törmelék és biofilm eltávolítást tesz lehetővé. A 3 méretben szállítható, 18, 19 és 20 mm mélységjelzéssel ellátott műanyag feltétek (Activator Tip) nem rendelkeznek bevonattal, nincs vágó hatásuk. A vékony, ergonómikus könnyökdarab dizájn minden kezelési területhez könnyű hozzáférést biztosít, az elemes működés tovább növeli a rugalmasságot. A motor 3 fokozatban állítható.

EndoActivator Set A0911: 1 kézidarab elemmel, 25-25 db Activator Tip kicsi, közepes nagy, 100 db védőhuzat, 1 db DVD leírással,			
188 020	1 db sequencia kártya	1 csomag	179.000
188 021	EndoActivator kézidarab A0912	1 db	119.000
Activator Tip, 25 db:			
188 022	kicsi (15/.02, 22 mm), sárga	1 csomag	19.995
188 023	közepes (25/.04, 22 mm), piros	1 csomag	19.995
188 024	nagy (35/.04, 22 mm), kék	1 csomag	19.995
188 025	kézidarab védőhuzat A0914, 100 db	1 csomag	8.195

Polimerizációs lámpák



SUPERLITE COLOR PEN

1.000 mw/cm² teljesítményű, egy gombbal vezérelhető LED polimerizációs lámpa. Az akku egy kábel segítségével tölthető, a lámpa töltés közben is használható. A feltöltött akkuval 2.000 másodpercen át polimerizálhatunk. A polimerizációs idő 10 másodperces lépésekben állítható. Műszaki adatok: a fényvezető átmérője: 8 mm; hullámhossz tartomány: 450 – 490 nm; a kézidarab tömege: 100 g; akku: Li-Ion (2400 mAh); garancia: lámpa 24 hónap / akku 6 hónap.

M+W Superlite Color Pen: 1 kézidarab beépített akkuval,

1 fényvezető, 8 mm, 1 fényvédő, 1 töltőkábel, 1 műanyag fali tartó:

200 000	fehér	1 csomag	59.995
200 001	narancs	1 csomag	59.995
200 002	világoszöld	1 csomag	59.995
200 003	kék	1 csomag	59.995
200 004	lila	1 csomag	59.995
200 005	rózsaszín	1 csomag	59.995
200 006	szürke	1 csomag	59.995
100 048	fényvezető, 8 mm	1 db	21.495
100 043	speciális fényvezető (pulpaközeli helyekre, kb. 30%-kal csökkenti a kimenő teljesítményt) ÚJDONSÁG	1 db	25.945
tartalék akku:			
200 007	fehér	1 db	24.495
200 008	narancs	1 db	24.495
200 009	világoszöld	1 db	24.495
200 010	kék	1 db	24.495
200 011	lila	1 db	24.495
200 012	rózsaszín	1 db	24.495
200 013	szürke	1 db	24.495

csak **59.995 Ft**



SUPERLITE POWER PEN

1.100 mW/cm² teljesítményű akkus LED polimerizációs lámpa. Mindössze egy gomb segítségével működtethető, így használata egyszerű és kényelmes. A feltöltés ideje alatt a lámpa a töltőkábel segítségével tovább használható, nem kell várnia a töltés befejezéséig. A feltöltött akku 2.000 másodperc polimerizációs időt biztosít. A polimerizációs idő 10 másodperces lépésekben állítható. műszaki adatok: a fényvezető átmérője: 8 mm; fényintenzitás: max. 1.100 mW/cm²; hullámhossz tartomány: 410 nm - 490 nm; kézidarab tömege: 100 g; kézidarab hossza (fényvezető nélkül): 148 mm; kézidarab átmérője: max. 25 mm; akku: Litium Ion (800 mAh); garancia: 24 hónap / akku 6 hónap.

M+W Superlite Power Pen:

1 kézidarab beépített akkuval, 1 töltőkábel,
1 fényvezető 8 mm, 1 fényvédő korong,
1 műanyag kézidarab tartó:

200 025	ezüst	1 csomag	94.995
200 026	fehér	1 csomag	94.995
200 027	fekete	1 csomag	94.995

kézidarab tartó:

200 028	ezüst	1 db	14.495
200 029	fehér	1 db	14.495
200 030	fekete	1 db	14.495
100 048	fényvezető, 8 mm	1 db	21.495

100 043	speciális fényvezető (pulpaközeli helyekre, kb. 30%-kal csökkenti a kimenő teljesítményt)	1 db	25.945
---------	---	------	--------

akku:

100 091	ezüst	1 db	33.945
100 035	fehér	1 db	33.945
100 036	fekete	1 db	33.945
100 092	töltőkábel	1 db	18.995



ÚJDONSÁG

csak **94.995 Ft**



SUPERLITE 1300

Akkumulátorral működő LED polimerizációs lámpa fényre kötő fogászati anyagok megvilágításához. Egyszerűen kezelhető, 4 különböző módban használható.

Ramp: A teljesítmény 3 másodpercen belül 0%-ról 100%-ra emelkedik (időbeállítások: 10, 20 vagy 30 másodperc).

Long: Speciális módozat időben hosszú munkákhoz, pl. fogfehérítés, 9 perc 100% teljesítményen (időbeállítás: 9 perc, percenkénti hangjelzéssel).

Fast: Az első másodperctől kezdve 100%-os teljesítmény (időbeállítás: 10 másodperc).

Pulse: 0,75 másodpercig teljes teljesítmény, ezután 0,25 másodperc szünet. Csökkenti a polimerizációs stressz kialakulásának lehetőségét (időbeállítás: 10, 20 vagy 30 másodperc).

A lámpa Li-ion akkumulátorral működik, amely teljesen feltöltött állapotban 4000 megvilágítási ciklusra is elég. Kialakítása ergonomikus, könnyen dolgozhatunk vele. Külön rendelhető hozzá egy ún. Bleaching Lightguide, amely a 13 és 23 közötti fogak megvilágítását teszi lehetővé egy lépésben.

Műszaki adatok: fényvezető átmérője: 8 mm, fényintenzitás: max. 1.300 mW, hullámhossz tartomány: 430 - 490 nm, az asztali töltő súlya: 560 g, a kézidarab súlya: 245 g (akkut és fényvezetőt is beleértve), kézidarab hossza: 196 mm (fényvezetővel), az asztali töltő méretei: 180 mm hosszú, 130 mm széles, 66 mm magas, akku: Li-Ion 2200 mAh, 3,7 V. Garancia: 24 hónap / akkumulátorra 6 hónap.

100 045	M+W Superlite 1300	1 db	125.000
100 046	M+W bleaching lightguide (fényvezető fogfehérítéshez)	1 db	21.495
100 047	akku	1 db	26.995
100 048	fényvezető 8 mm	1 db	21.495
100 049	hálózati kábel	1 db	18.995



csak **125.000 Ft**

Akár 7% automatikus kedvezmény

20.000 forint
feletti rendelés

Ingyenes szállítás

50.000 forint
feletti rendelés

2% kedvezmény

100.000 forint
feletti rendelés

3% kedvezmény

200.000 forint
feletti rendelés

4% kedvezmény

300.000 forint
feletti rendelés

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházás megrendelések esetén)

2% kedvezmény

4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény

7% kedvezmény



A. M. Edelingh nagyteljesítményű polimerizációs lámpa

A kábel nélküli, nagyteljesítményű LED lámpa kiválóan alkalmas minden tömőanyag professzionális és időtakarékos polimerizációjára akár 3 másodperc alatt. A rendkívül széles hullámhossz tartományban – 390 – 510 nm – történő optimális polimerizációról három LED gondoskodik. A lámpa ezáltal valamennyi ismert tömőanyaghoz használható. Két polimerizációs program között választhat: 1. program: az első 4 másodpercben folyamatosan növekvő fényintenzitás. A 4. másodperc végére elért teljesítmény 1.500 mW/cm². (a lámpa markolatán levő gyűrű zölden világít) 2. program („hyper”): a 3.500 mW/cm² teljesítményt a lámpa pulzálva éri el (a markolatán a gyűrű piros) **Műszaki adatok:** akkumulátor: erős Li-ion, kb. 4.000 másodperc munkaidő. Fejméret: 14 mm magas, átmérője 16 mm. Kézidarab: 215 mm hosszú, súlya 165 g. 24 hónap garancia.

A.M. Edelingh nagyteljesítményű polimerizációs lámpa:

1 kézidarab, 1 töltőkábel, 50 eh.védőfólia,
1 tartó, használati útmutató

144 000	fekete	1 db	195.000
144 006	fehér	1 db	195.000
144 001	egyszerhasználatos védőfólia, 50 db	1 csomag	6.495
144 002	tartalék akkumulátor	1 db	34.325
144 003	töltőkábel	1 db	18.995

A PRÉMIUM MÁRKA

Kizárólag az M+W Dental Magyarország Kft-től.



Bluephase style (ivoclar vivadent)

Vezeték nélküli LED polimerizációs lámpa minden fényre kötő fogászati anyag megvilágításához. (fény-spektrum 385-515 nm). 1.100 mW/cm² fényintenzitás, 2 gombos vezérlés 3 időbeállítási lehetőséggel (10, 15 és 20 másodperc). A click & cure funkcióval mellőzhető a lemerült akkumulátor újratöltését igénylő kellemetlen várakozási idő. A kézidarab könnyen csatlakoztatható az asztali töltőhöz. A 10mm-es fényvezetővel nagyobb területet kezelhetünk, az akkumulátor nagyteljesítményű, üzemelési ideje 20 perc. A garancia 3 év (akkumulátorra 1 év).

Bluephase style:

1 kézidarab, 1 töltő, 1 hálózati kábel,
1 fekete fényvezető, 10 mm,

091 050	szürke	1 db	458.000
091 067	pink	1 db	458.000
091 068	zöld	1 db	458.000
091 051	style fekete fényvezető, 10 mm	1 db	59.995
091 053	style védőkorong, 50 db	1 db	5.995

ÚJDONSÁG



Bluephase G4 (ivoclar vivadent)

Intelligens akkus LED polimerizációs lámpa. Amennyiben a lámpa a polimerizálás alatt elmozdul, a polimerizációs idő automatikusan meghosszabbodik 10%-kal. A lámpa ezt egy enyhe rezgéssel jelzi a felhasználó számára. Ha a megbízható polimerizáció ennek ellenére veszélybe kerül, a lámpa megszakítja a ciklust, így azt újra kell indítani. A lámpa programjainak köszönhetően bármely indikációra alkalmas. PreCure programja megkönnyíti a felesleg eltávolítását a beragasztások során. Fényteljesítmény: 1.200 mW/cm², hullámhossz tartomány 385-515 nm. Garancia: 3 év (akku: 1 év)

1 kézidarab, 1 töltő, 1 hálózati kábel, 1 akku,

191 000	1 kézidarab alátét, 1 fényvezető 10 mm	1 db	469.000
191 001	Bluephase G4 + Radiometer	1 db	544.000
191 005	akku	1 db	99.000
191 002	fényvezető Pin Point 6>2 mm, fekete	1 db	62.000
191 003	fényvezető, 10 mm, fekete	1 db	11.995
191 004	védőtasak, 100 db	1 csomag	62.000
191 006	fényvédő korong	1 db	2.475
191 007	kézidarab alátét	1 db	9.995

Bluephase PowerCure (ivoclar vivadent)

Intelligens akkus LED polimerizációs lámpa. Amennyiben a lámpa a polimerizálás alatt elmozdul, a polimerizációs idő automatikusan meghosszabbodik 10%-kal. A lámpa ezt egy enyhe rezgéssel jelzi a felhasználó számára. Ha a megbízható polimerizáció ennek ellenére veszélybe kerül, a lámpa megszakítja a ciklust, így azt újra kell indítani. A lámpa programjainak köszönhetően bármely indikációra alkalmas.

PreCure (előpolimerizáló) program - 950mw/cm² - a feleslegek eltávolítására, előre beállított idő: 2 mp;

High program - 1.200mw/cm²;

Turbó program - 2.000mw/cm²;

3s program - 3.000mw/cm² - 3 másodperces polimerizáció.

Hullámhossztartomány: 385-515 nanométer.

091 098	Bluephase PowerCure 100-240V	1 db	619.000
091 099	fényvezető 10>9 mm, fekete	1 db	71.000

ÚJDONSÁG



VALO polimerizációs lámpa (Ultradent)

• Rendkívül magas végteljesítményű (3200 mW/cm²) LED polimerizációs lámpa, tartós, ütészálló alumínium burkolattal.

• A zafír keménységű bevonat nem karcolódik, könnyen tisztítható

• 3 db kék és 1 db ibolya LED, amely minden fogászati anyag polimerizációjára képes (395-480 nm)

• Három féle üzemmód – **Standard** 1000 mW/cm², **High** 1400 mW/cm² és

Xtra Power 3200 mW/cm² – kiválóan alkalmazkodik az eltérő polimerizációs igényekhez

• Egyenes kialakítású, a fényt fókuszáló fényvezető, amely lehetővé teszi a teljes tömésfelszín egyenletes megvilágítását

• A VALO egyedülállóan kényelmes és hatásos hozzáférést biztosít a száj bármely területén

• Könnyű, ergonomikus kialakítású kézidarab - kényelmes használat és hosszú élettartam

• Kapható vezetékes és vezeték nélküli változatban.

	Standard mód 1000 mW/cm ²	Nagy teljesítmény mód 1400 mW/cm ²	Xtra Power mód 3200 mW/cm ²
Rétegenként	10 mp	2 x 4 mp	1 x 3 mp
Végző polimerizálás	20 mp	2 x 4 mp	2 x 3 mp

VALO polimerizációs lámpa, vezetékes:

917 036	1 db VALO LED polimerizációs lámpa, 1 db hálózati adapter, 1 db tartó, 1 db fényvédő	1 csomag	329.000
---------	---	----------	---------

VALO polimerizációs lámpa, vezeték nélküli:

	1 db VALO LED polimerizációs lámpa, 1 db töltő, 4 db újratölthető elem 1 db tartó, 1 db fényvédő		
076 010	fekete	1 csomag	415.000
076 016	grafitszürke	1 csomag	415.000
076 015	arany színű	1 csomag	415.000
076 014	fukszia	1 csomag	415.000
076 013	türkiz kék	1 csomag	415.000



Elipar DeepCure LED polimerizációs lámpa (3M)

Vezeték nélküli LED polimerizációs lámpa 2 változatban (műanyag, illetve nemesacél házban). Az optimalizált fényeloszlás homogén polimerizációt biztosít. Az új továbbfejlesztett fényvezető könnyű hozzáférést biztosít bármely fogfelülethez. Fényintenzitása magas (1.480 mW/cm²). Mindössze két gomb segítségével egyszerűen kezelhető. Hullámhossz tartomány: 430-480 nm. Garancia: 2 év.

020 063	Elipar DeepCure-L, (műanyag ház)	1 db	265.000
020 062	Elipar DeepCure-S, (nemesacél ház)	1 db	549.000

Érdeklődjön időszakos csomagajánlatunk után!



Translux Wave (Heraeus Kulzer)

Könnyű, vezeték nélküli, beépített radiométerrel rendelkező LED polimerizációs lámpa. Spektruma 440-480 nm, teljesítménye 1.200 mW/cm². Valamennyi kámförchinon alapú fényre kötő anyag megvilágítására alkalmas, 360° fokban forgatható fényvezetője megkönnyíti a moláris területen végzett kezelést a fogorvos és beteg számára egyaránt. Programok: 10, 20 másodperc, „soft start” funkcióval. Garancia: 2 év.

Translux Wave:

042 040	kézidarab, elem, 8 mm-es fényvezető, védőkupak, töltőállomás, hálózati csatlakozó, 3 adapter	1 db	349.000
---------	---	------	---------



Keverőgépek



Pentamix Lite (3M)

Pentamix Lite - belépőmodell az automata keverés világába. Keverési sebessége egyaránt megfelel kezdőknek, és olyan fogászati praxisoknak is, ahol naponta számos lenyomatvételt készítenek. A Pentamix Lite készülék minden 3MESPE Penta lenyomatanyaggal kompatibilis - a nagy viszkozitású putty anyagoktól kezdve a közepes sűrűségű anyagokig. Megbízható minőségű, mindig homogén, buborékmentes keveréket állít elő. Garancia 2 év.

020 008	Pentamix Lite	Érdeklődjön időszakos csomagajánlatunk után!	
020 009	Pentamix Lite kartus (üres)	1 db	18.995



Pentamix 3 (3M)

Keverőkészülék minden használatos nagy kartusos és tömlőfóliás kisereléshez 5:1 arányban. Kétszer gyorsabb mint más készülékek* (putty-nál is). Kezelése jobb- és balkezesek számára is egyszerű. Tökéletes keverési minőség: homogén, buborékmentes keverés minden 3M ESPE lenyomatanyagnál. Gyors és pontos adagolás egy gombnyomásra. Falra is szerelhető. Garancia: 2 év.

020 045	Pentamix 3	Érdeklődjön időszakos csomagajánlatunk után!	
---------	------------	---	--

*csak az új, eredeti 3M ESPE Penta-rendszer összetevőinek alkalmazása esetén



M+W select KAPSZULAKEVERŐ

Univerzális kapszulaKeverő minden szokásos kapszulás anyag keverésére. A keverési idő 1 másodperces lépésenként szabadon állítható, egyidejűleg 10 beállított keverési idő tárolható. A készülék halkán, minimális vibrációval dolgozik, a bekapcsolás után azonnal 4.200 rezgés / perc sebességre gyorsul. A LED kijelző egyszerű, könnyen áttekinthető. Garancia 2 év.

200 020	M+W kapszulaKeverő	1 db	99.995
---------	--------------------	------	--------

csak **99.995 Ft**



Capmix (3M)

Formatervezett, csendes kapszulaKeverő a szokványos kapszulatípusokhoz. A kapszula egyszerűen behelyezhető, a kapszularögzítés automatikus. Előre beállított 10 és 15 mp-es keverési program közül választhat, vagy szabadon beállíthatja a keverési időt (1-39 mp). Méret (Sz x Ma x Mé): 19,5 x 16 x 19,5 cm. Keverési frekvencia: 4.300 rezgés/perc. 2 év garancia.

020 005	Capmix	1 db	225.000
---------	--------	------	---------



Silamat S6 (ivoclar vivadent)

Korszerű keverőkészülék amalgámokhoz, üvegionomerekhez és más kapszulás vagy fecskendő anyagokhoz. **Előnyök:** A korszerű praxisok igényeinek megfelelő attraktív design. A lekerekített formáknak és a levehető tetőnek köszönhetően könnyen tisztítható. Sokszorosan kipróbált és bevált Silamat technológia. Átlag feletti rezgésszám (4.500/perc). Speciális, nyolcas formát leíró rezgő mozgás, szabadalmaztatott keverő villa. Kompatibilis valamennyi népszerű kapszulával és fecskendővel. 3 év garancia.


091 011	Silamat S6	1 db	235.000
---------	------------	------	---------

Fóliahegesztő készülékek

MELaseal 100+ (MELAG)

A MELaseal 100+ egy tartós fűtésrendszerű fóliahegesztő, bekapcsolása után 2 perccel már üzemkész. A szabályszerű varrat előállításához szükséges időtartamot egy jelzőlámpa jelzi, hiba esetén (pl. túl rövid hegesztési idő) hanggal jelez a készülék. A varrat 10 mm. A készülékház nemesacél. Méretek fogantyúval (Szé x Ma x Mé): 41,5 x 15 x 24 cm, standard tekercstartóval - 41,5 x 15 x 46 cm, comfort tekercstartóval 41,5 x 37 x 28 cm. Hálózati csatlakozás: 230 Volt – 50/60 Hz, teljesítmény 300 W. Tekercstartó és fólia nélkül.

298 793	MELaseal 100+	1 db	149.000
298 794	standard tekercstartó	1 db	19.995
398 796	comfort tekercstartó	1 db	24.995

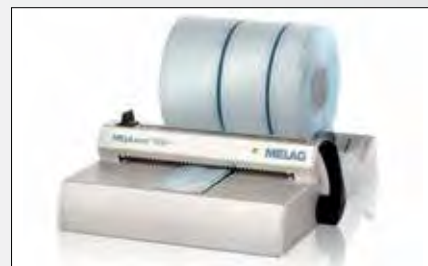

The Euroseal (Euronda)

Fóliahegesztő készülék, mely villámgyorsan - 3-4 másodperc alatt - 12 mm széles varratot készít a papír/fólia csomagolóanyagban. A beépített munkaasztal egyidejűleg több fólia hegesztését teszi lehetővé. A kihúzható tekercstartó állvány több tekercs tárolására alkalmas. Az állvány akár külön a falra is szerelhető. A gép kezelését akusztikus és optikai kontroll segíti. Áramfelvétel: 100 Watt. Méretek: (SZ x MÉ x MA) 44 x 47 x 33 cm, kihúzott tekercstartóval: 43 cm.

Súly: 8,85 kg. (a szállítás a képen látható fóliák nélkül történik) Garancia: 2 év

075 712	The Euroseal (terkerstartóval)	1 db	249.000
---------	--------------------------------	------	---------



Euroseal 2001 Plus (Euronda)

Kompakt rendszer orvosi papír/fólia-csomagolások lezárásához. Nem kell többé teflonszalagot és fűtőszálat cserélni. Az új, önszabályozó ellenállás, tökéletesen állandó hőmérsékletet garantál. Egyszerű, és nagyon megbízható. Gyors hegesztés (kb. 3-4 másodperc). 12 mm széles hegesztési varrat. Ergonómikus, könnyen kezelhető fogantyú. Asztali és falirögzítés is lehetséges. A hegesztés befejezését vizuálisan és akusztikusan is jelzi. A beépített tekercstartó 100m illetve 200m tekercshez is átalakítható. Sima, könnyen tisztítható felületek. 2 év garancia. A készülék méretei: 450 x 200 x 385 mm (Szé x Ma x Mé) Hálózati csatlakozás: 230 V-50/60 Hz, teljesítmény 100 W, súly: 7,5 kg.


075 710	Euroseal 2001 PLUS	1 db	189.000
---------	--------------------	------	---------



Fóliahegesztő készülék hawo hd 260 MS-8 (HAWO)

Fóliahegesztő készülék különféle eszközök professzionális steril csomagolására. Bármely szokásos sterilizációs csomagoló anyag (oldal redővel vagy anélkül) lezárására alkalmas. Az egyenletes nyomásnak köszönhetően biztosan zár. A hegesztési idő fokozat nélkül szabályozható. Fény vagy hang jelzi (kikapcsolható), ha a gép üzemben van. Kompakt készülék, beépített fóliatekercs tartóval és vágóberendezéssel. Nincs előmelegítési idő, energiatakarékos, használata könnyű. A hegesztés szélessége: 8 mm, hossza max. 250 mm. Méret (Sz x Mé x Ma): 420 x 300 x 220 mm, hálózati csatlakozás: 230 V/50 Hz, teljesítmény: 850 VA, súly: kb. 8 kg, fehér színű. Fólia nélkül. Garancia: 1 év. **Hőlégt sterilizátorhoz is!**

059 770	hawo hd 260 MS-8	1 db	174.000
059 776	tálca 250 T, Sz x Ma: 36 x 23 cm	1 db	15.995
059 778	hegesztőszalag, teflon	1 db	2.895
059 779	fűtőszál	1 db	3.565
059 782	pótpenge	1 db	3.325

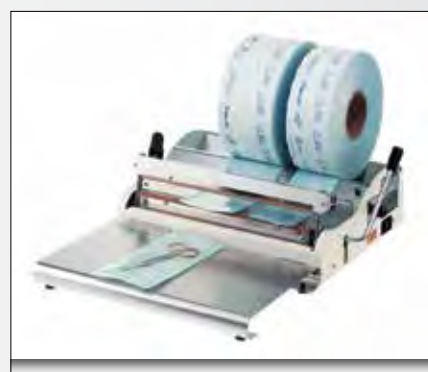

Akár 7% automatikus kedvezmény

20.000 forint
feletti rendelés

Ingyenes szállítás

50.000 forint
feletti rendelés

2% kedvezmény

100.000 forint
feletti rendelés

3% kedvezmény

200.000 forint
feletti rendelés

4% kedvezmény

300.000 forint
feletti rendelés

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházás megrendelések esetén)

2% kedvezmény

4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény

7% kedvezmény

Hőlégenderilizátorok, autoklávok



Melag 75 / 205 / 255 hőlégenderilizátorok (MELAG)

Kiváló minőségű nemesacélból készült, hosszú élettartamú hőlégenderilizátorok, 3 különböző űrtartalommal. A készülékek cirkulációs elven működnek, ventilátor biztosítja a kamra valamennyi pontján egyenletes sterilizációs hőmérsékletet. A pontos hőfokszabályzó segítségével a kamra hőmérséklete 60°C-180°C (typ. 75) illetve 60°C-200°C (typ 205 / 255) tartományban fokozat nélkül állítható.

	Melag 75	Melag 205	Melag 255
Belső méret (cm)	29,5 x 19,5 x 7,5	19 x 36 x 20	50 x 21 x 20
Térfogat	4,3 liter	14 liter	21 liter
Külső méret (cm)	40 x 31 x 26	31 x 47 x 38,5	62 x 32 x 39
Tálcák száma*	2 / 2	6 / 3	6 / 3
Maximális rakomány	2 kg	5,5 kg	5,5 kg
Tömeg	12 kg	17 kg	22 kg
Cikkszám	917 015	917 016	917 017
Ár**	245.000	375.000	445.000

Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!



MELAtronic® EN (MELAG)

Tömör eszközök sterilizálására alkalmas autoklávok, 3 különböző űrtartalommal. A készülékek kettő „S” (univerzális és prion), valamint kettő „N” (gyors és kímélő) programmal rendelkeznek. A két „S” program kis mennyiségű, tömör, csomagolt eszköz sterilizálására alkalmas. A gyors program (17-21 perc szárítás nélkül) segítségével csomagolatlan tömör műszereket, a kímélő programmal (121°C) pedig ugyancsak csomagolatlan, hőérzékeny eszközöket sterilizálhatunk.

	MELAtronic® 15EN	MELAtronic® 23EN
Belső méret (cm)	38 x Ø15	45 x Ø23
Térfogat	7 liter	19 liter
Külső méret (cm)	50 x 44 x 33	59 x 52 x 38
Tálcák száma*	3 / 3	5 / 3
Maximális rakomány	2 kg tömör eszköz	4 kg tömör eszköz
Tömeg	19 kg	30 kg
Cikkszám	917 005	917 007
Ár**	899.000	999.000

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!



Euroklav®+ / S osztályú autokláv (MELAG)

Az olyan praxisoknak, ahol az egyszerű műszerek és a felhasznált csomagolások típusa miatt közepes követelmények vannak, a MELAG az Euroklav®+ sorozat S osztályú autoklávjait ajánlja. Az Euroklav® 23/29 VS+ berendezések az egyszerű elővákuum és a pulzáló túlnyomásos eljárás kombinációjával működnek a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb sterilizálás érdekében. Ez különösen az egyszerű csomagolt műszerek és textíliák esetében fontos. Ezzel az eljárással egy fogorvosi praxis legtöbb műszerének sterilizálása elvégezhető. Valamennyi Euroklav®+ rendelkezik gyors programmal. (Az Euroklavok vízcsatlakozást nem igényelnek.)

	Euroklav 23VS+*	Euroklav 29VS+*
Belső méret (cm)	45 x Ø25	45 x Ø25
Térfogat	22 liter	18 liter
Külső méret (cm)	42,5 x 48,5 x 66	42,5 x 48,5 x 57
Tálcák száma*	5/3	5/3
Maximális rakomány	4 kg műszer 1 kg textília	3 kg műszer 0,8 kg textília
Tömeg	43 kg	43 kg
Cikkszám	917 012	917 013
Ár**	1.375.000	1.375.000

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!

Minőség és precízió a legmagasabb higiéniai elvárások teljesítéséért

Több mint 60 évvel ezelőtt kezdett a MELAG Berlinben fertőtlenítő berendezések előállítására specializálódni. Minőség tudattal és nyitottsággal az innovációk iránt, a legmagasabb biztonságra törekedve sikerült a családi vállalkozásnak piacvezető gyártóvá emelkednie. Világszerte több mint 450 000 MELAG berendezés a bizonyítéka ennek a sikernek.

Az EN 13060 számú Európa szabvány három osztályba sorolja az autoklávokat.

„**B osztály**”: a legmagasabb követelményeknek eleget tevő autoklávok. „**S osztály**”: kisebb teljesítményű autoklávok, melyek nem alkalmasak összetett üreges, illetve többszörösen csomagolt műszerek sterilizálására. „**N osztály**”: tömör, csomagolatlan eszközök sterilizálására használható autoklávok. A Melag mindhárom osztályban kiváló minőségű, megbízható készülékeket szállít.

Vacuklav®+ / B osztályú autokláv - a „Profi osztály” (MELAG)

A B osztályú autoklávok a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek, amiket a praxisban előforduló rakományokkal szemben támasztani lehet. Ezzel minden üreges testű műszert, bármilyen típusú csomagolásban biztonságosan lehet sterilizálni. A B osztály nagy teljesítőképessége nagy mennyiségű rakományt és gyors ciklusokat tesz lehetővé. A frakcionált elővákuum eljárás garantálja a teljes levegőkiszorítást és az ezt követő vízgőztelítődés miatt - a biztonságos sterilizálást. A mély vákuum elősegíti a rakomány szárítását is.

Az összes Vacuklav®+ két gyorsprogrammal rendelkezik, olyan műszerek sterilizálásához, melyekre rövid időn belül szükség van. A „gyors B” program - háromszoros elő vákuummal - kis mennyiségű (0,5 kg) becsomagolt üreges testű műszer sterilizálására alkalmas. A ciklus - beleértve a 10 perc szárítást is - csupán 28 percet vesz igénybe. A „gyors S” programmal 0,5 kg csomagolatlan rakományt sterilizálhatunk kettős elővákuummal, mindössze 14 perc alatt (beleértve a 2 perc szárítást is).

	Vacuklav 30B+® vízcsatlakozást igényel	Vacuklav 31B+® nem igényel vízcsatlakozást	Vacuklav 23B+® nem igényel vízcsatlakozást	Vacuklav 24B+® vízcsatlakozást igényel
Belső méret (cm)	35 x Ø25	35 x Ø25	45 x Ø25	45 x Ø25
Térfogat	18 liter	18 liter	22 liter	22 liter
Külső méret (cm)	42,5 x 48,5 x 57	42,5 x 48,5 x 57	42,5 x 48,5 x 72	42,5 x 48,5 x 66
Tálcák száma*	5/3	5/3	5/3	5/3
Maximális rakomány	5 kg műszer 2 kg textil	5 kg műszer 1,8 kg textil	5 kg műszer 1,8 kg textil	7 kg műszer 2,5 kg textil
Tömeg	44 kg	44 kg	49 kg	48 kg
Cikkszám	917 008	917 009	917 011	917 010
Ár**	1.895.000	1.895.000	1.995.000	1.995.000

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!

Vacuklav + / B osztályú autokláv - a „Prémium-plusz-osztály” (MELAG)

A „Prémium-plusz-osztály” autoklávjai egyedülálló színes érintőképernyős vezérlőjükkal minden eddigienél magasabb kezelői komfortot, gyors programválasztást és könnyű áttekinthetőséget nyújtanak a felhasználó számára. A dupla falú sterilizáló kamra a speciális - ún. „Twin-Chamber technológia” által a levegő még gyorsabban eltávolítható a steril csomagolásokról és az üreges eszközök belsejéből. A gyorsprogramok segítségével a csomagolt eszközök - beleértve a frakcionált elővákuumot és a szárítási időt - mindössze 19 perc, míg a csomagolatlan eszközök csupán 10 perc alatt sterilizálhatók. Az univerzális program választásával 7 kg műszer kb. 30 perc alatt sterilizálható. Nagyobb, akár 9 kg-os rakományok esetén kiegészítő szárító funkció aktiválható. A „Prémium-plusz-osztály” négy változatban - hosszabb és rövidebb kamrával, valamint vízcsatlakozást igénylő vagy önálló - szállítható.

	Vacuklav 40B+® vízcsatlakozást igényel	Vacuklav 41B+® nem igényel vízcsatlakozást	Vacuklav 43B+® nem igényel vízcsatlakozást	Vacuklav 44B+® vízcsatlakozást igényel
Belső méret (cm)	35 x Ø25	35 x Ø25	45 x Ø25	45 x Ø25
Térfogat	18 liter	18 liter	22 liter	22 liter
Külső méret (cm)	46 x 50 x 55 (magasság kezelőfelülettel: 56) A készülék lábai 50 cm-es munkalapról helyezhetők	46 x 50 x 55 (magasság kezelőfelülettel: 56) A készülék lábai 50 cm-es munkalapról helyezhetők	46 x 50 x 68 (magasság kezelőfelülettel: 56) A készülék lábai 60 cm-es munkalapról helyezhetők	46 x 50 x 68 (magasság kezelőfelülettel: 56) A készülék lábai 60 cm-es munkalapról helyezhetők
Tálcák száma*	6/3	6/3	6/3	6/3
Maximális rakomány	max. 9 kg műszer max. 2 kg textil	max. 9 kg műszer max. 2 kg textil	max. 9 kg műszer max. 2 kg textil	max. 9 kg műszer max. 2,5 kg textil
Tömeg	57 kg	59 kg	66 kg	62 kg
Cikkszám	917 025	917 026	917 027	917 028
Ár**	2.599.000	2.599.000	2.795.000	2.795.000

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!





AquaDist (Euronda)

Desztilláltvíz előállító készülék (felforralja a vizet, majd lecsepegteti a gőzt). Tankméret 4 liter. A desztillálás időigénye 5-6 óra. Súlya 3,5 kg, átmérője 23 cm, magassága 36 cm.

Teljesítmény: 580W. Garancia: 1 év.

075 070	AquaDist desztilláló készülék	1 db	105.000
075 071	AquaDist aktív szén-szűrő, 12 tasak	1 csomag	9.175
075 072	AquaDist tisztítópor, 500 g	1 csomag	9.175

Ultrahangos tisztítók



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!



Ultrahangos tisztító készülék (qteck)

Rendkívül kedvező árú, kiváló teljesítményű, erős tisztítóhatású ultrahangos készülékek. Nemesacél ház, szabályozható fűtés, 60 perces időzítő vagy folyamatos üzemelés. Garancia 1 év. Frekvencia 35 kHz.

Műszaki adatok:	GS2	GS3	GS4
ultrahang generátor:	2 db	3 db	4 db
széles hullámsávú; felvett teljesítmény:	250 W	420 W	460 W
fűtési teljesítmény:	150 W	300 W	300 W
kádméret (H x Sz x Ma):	230 x 150 x 80 mm	238 x 138 x 100 mm	300 x 150 x 100 mm
külső méret (H x Sz x Ma):	250 x 150 x 205 mm	265 x 160 x 235 mm	330 x 150 x 100 mm

ultrahangos készülék GS 2:			
045 954	készülék nemesacél kosárral és tetővel	1 db	104.995
045 955	lyukas tető	1 db	7.995
045 956	nemesacél kosár	1 db	12.525
ultrahangos készülék GS 3:			
045 960	készülék nemesacél kosárral és tetővel	1 db	124.995
045 961	lyukas fedél	1 db	8.995
045 964	nemesacél kosár	1 db	13.795
ultrahangos készülék GS4:			
045 957	készülék nemesacél kosárral és tetővel	1 db	146.995
045 958	lyukas tető	1 db	9.995
045 959	nemesacél kosár	1 db	14.695
tartozékok:			
045 962	üveg pohár	1 db	2.995
045 963	pótkosár, nemesacél	1 db	6.995

Sebészeti készülékek



Surgic Pro (NSK)

Erőteljes forgatónyomaték (80 Ncm), széles fordulatszám spektrum (200 - 40.000 ford./perc) és kiemelkedően jó megvilágítás a LED-nek köszönhetően (32.000 Lux). Az új sebészeti mikromotor nagyon könnyű (280g) és rövid (81,9mm), ergonómikus és könnyen kezelhető. A készüléken 8 program áll rendelkezésre fordulatszám, nyomaték, hűtés mennyisége és forgásirány tárolásának lehetőségével, így implantátum rendszertől függően komplett munkafolyamatot is beállíthatunk. A nyomaték kalibrálás az egyes kézdarabok különböző ellenállása alapján automatikusan történik (Surgic PRO AHC). A jól megvilágított nagy kijelzőt mindenkor könnyen leolvashatjuk. Kérjük mindenképpen tartsák szem előtt, hogy az új Surgic Pro magas nyomatéka miatt nem használható a Surgic XT Plus-al használatos kézdarabokkal. Sebészeti kézdarabjainkat a magasabb (80 Ncm) forgatónyomatékhoz igazítottuk, megnevezésük és cikkszámuk változatlanok, de a Surgic XT-vel és az új generációs Surgic Pro+-val is kompatibilisek.

Surgic Pro NON-OPTIC			
917 950	1 AHC vezérlésű készülék, SL70M fény nélküli mikromotor, lábvezérlő, SG20 (20:1) könyökdarab, 5 db hűtőtömlő	1 készlet	1.100.000
Surgic Pro OPTIC			
159 021	1 AHC vezérlésű készülék, SL70M LED fényes mikromotor, lábvezérlő, X-SG20L (20:1) fényes könyökdarab, 5 db hűtőtömlő	1 készlet	1.495.000
Surgic Pro+			
917 951	1 AHC vezérlésű készülék, SL70M LED fényes mikromotor, lábvezérlő, X-SG20L (20:1) fényes könyökdarab, 5 hűtőtömlő, USB csatlakozás adat dokumentáláshoz	1 készlet	1.645.000
898 088	autoklávizható hűtőtömlő (S900-055)	1 db	20.995
098 051	egyszerhasználatos hűtőtömlő, 5 db (Y900-113)	1 csomag	23.445

Cikkszám Termékleírás Rendelési egység Ft

Hűtőtömlő sebészeti gépekhez (OMNIA)

998 090	hűtőtömlő Elcomed 200/ 100 W&H géphez	1 db	3.795
998 096	hűtőtömlő KaVo IntraSurg 300/ 500 géphez	1 db	3.795
998 095	hűtőtömlő Elcomed SA 200 W&H 19 cm pumpa/ Innova Corp-Straumann/Frioss Unit E géphez	1 db	3.795
998 094	hűtőtömlő Nobel Biocare80/ Implantmed W+H/ Frioss Unit S/ Ace/ Straumann/ Innova Corp. 3L/ Centerpulse/Lifecore géphez	1 db	3.795
998 093	hűtőtömlő Surgic II XT NSK géphez	1 db	3.795
998 091	hűtőtömlő Nouvag 3000/ 7000/ MD10 Strauman model Nouvag géphez	1 db	2.995



Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

hf Surg (Hager & Werken)

Kompakt nagyfrekvenciás sebészeti készülék pengefinomságú, nyomás nélküli vágásra. A frekvencia a vágást és a koagulációval történő vágást egyaránt lehetővé teszi. A sebgyógyulás gyors és fájdalommentes. A készülék kezelése egyszerű, a hullám forma illetve a teljesítmény könnyen állítható. Az automatikus szabályozó rendszer a kimeneti teljesítményt fémmel való érintkezéskor le szabályozza. A kézidarab és az elektródák 134°C-ig autoklávozhatóak. **Műszaki adatok:** 2,2 MHz, max. 50 W, 230 V / 50 Hz. Méret (szélesség x magasság x mélység) 19 x 9 x 18 cm. Súly: kb. 3 kg.


022 012	hf Surg: készülék lábkapcsolóval, kézidarabbal, 4 vágó elektródával és neutrális elektródával	1 csomag	415.000
---------	--	----------	---------



Elektródák

Elektródák - 1,6 mm befogó átmérőjű elektródával működő - elektrosebészeti készülékekhez.

	hajlítható sárga	hajlítható kék	merev fekete	Ár
1	048 001	–	048 025	3.145
2	048 002	–	048 026	3.145
3	048 003	–	048 027	3.145
6	048 004	–	048 028	4.175
11	048 005	–	048 029	4.175
12	048 006	–	048 030	4.175
13	048 007	–	048 031	4.175
14	048 008	–	048 032	4.175
15	048 009	–	048 033	4.175
17	048 011	–	048 035	4.175
18	048 012	–	048 036	4.175
20	048 014	–	048 038	4.175
21	048 015	–	048 039	4.175
22	048 016	–	048 040	4.175
24	048 017	–	048 041	4.175
31	–	048 018	048 042	4.175
32	–	048 019	048 043	4.175
33	–	048 020	048 044	4.175
34	–	048 021	048 045	4.175
35	–	048 022	048 046	4.175
36	–	048 023	048 047	4.175

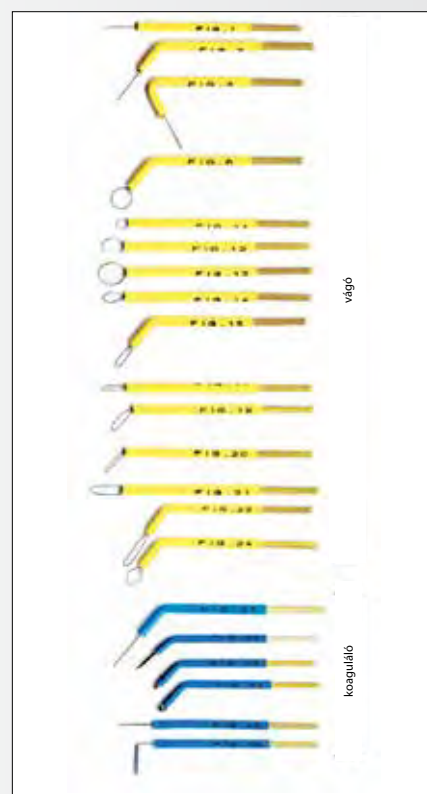

Akár 7% automatikus kedvezmény

20.000 forint
feletti rendelés

Ingyenes szállítás

50.000 forint
feletti rendelés

2% kedvezmény

100.000 forint
feletti rendelés

3% kedvezmény

200.000 forint
feletti rendelés

4% kedvezmény

300.000 forint
feletti rendelés

5% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházás megrendelések esetén)

2% kedvezmény


4% kedvezmény

5% kedvezmény

6% kedvezmény

7% kedvezmény


Egyéb készülékek, eszközök

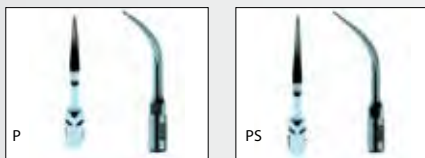

Depurátor hegyek (EMS)

Depurátor hegyek EMS fogköeltávolító készülékekhez.

798 090	A: fogköeltávolításhoz minden quadránsban	1 db	32.835
798 093	P (perio-probe): fogköeltávolításhoz minden quadránsban	1 db	36.995
798 094	PS (perio-probe finom): szubgingivális concrementumok és lerakódások eltávolításához	1 db	43.125

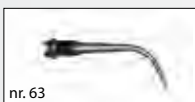

Ultrahangos depurátor hegyek (KaVo)

PIEZOlux-/ SONOsoft depurátorhoz.

fogköeltávolításhoz:			
238 055	sarló nr. 9	1 db	39.995
238 056	perio nr. 10	1 db	42.585
238 057	univerzális nr. 11	1 db	39.995
parodontológiához:			
238 058	paro-fej hosszú, egyenes nr. 63	1 db	39.995
238 059	paro-fej hosszú, bal nr. 64	1 db	39.995
238 060	paro-fej hosszú, jobb nr. 65	1 db	39.995
inlay-k behelyezéséhez:			
238 061	inlay-fej nr. 47	1 db	44.995
182 012	nyomatókulcs SONICflex 2000N/2003LX-hez és PIEZOlux/SONOsoft -hoz	1 db	13.995

PIEZOsoft-/ Piezo LED depurátorhoz.

Piezo deputátor hegy készlet:			
3 Piezo depurátor hegy (nr. 201, 202, 203),			
139 563	nyomatókulcs, 6 db-os sterilizáló box, kopásmérő kártya	1 csomag	114.995
132 481	Piezo depurátor hegy nr. 203	1 db	47.995
913 573	Piezo depurátor hegy nr. 202	1 db	38.995
913 572	Piezo depurátor hegy nr. 201	1 db	38.995



Emeletes kocsi*

Emeletes kocsi 3 tálcával kényelmes távolságra egymástól, hogy a kisgépek is elférjenek. Cinkkel bevont fémből, porlakk réteggel, oldalsó fogantyúval, műanyag görgőkkel. Teljes méret: 46 x 36 x 79 cm, pakolási felület 38 x 28 cm.

598 061	emeletes kocsi	1 db	73.495
598 069	emeletes kocsi szerelt dugócsatlakozó aljzattal	1 db	82.945

* A termék visszaküldésére csak előzetes egyeztetés után, eredeti csomagolásban és kifogástalan állapotban van lehetőség. A visszaküldött termék értékének 10%-a visszavásárlási díjként levonásra kerül.



Lunos profilaxis fejtámla (Dürr Dental)

Kényelmes és biztonságos fejtámla. Megtámasztja a nyakat és a tarkót. Tépőzárral egyszerűen a kezelőegységhez rögzíthető. A viszkoelasztikus szivacs csökkenti a nyomást, reagál a test hőmérsékletére, és hozzáigazodik minden egyes beteghez. Bevonata puha, vízálló és bőrbarát. Lemosható és fertőtleníthető.

140 475	Lunos profilaxis fejtámla	1 db	31.995
---------	---------------------------	------	--------



FIÓKBETÉTEK

Krémfehér, ütésálló műanyagból készült fiókbetétek.

lapos betétek: 31 x 41 x 2 cm.

mély betétek: 31 x 41 x 8,5 cm.

559 060	fiókbetét 4 beosztással, lapos	1 db	9.995
559 063	fiókbetét 34 műszer számára, lapos	1 db	9.995
559 061	fiókbetét 4 beosztással, mély	1 db	9.995
559 062	fiókbetét 6 beosztással, mély	1 db	9.995



csak **9.995 Ft**

Fiókbetétek (Speiko)

Ütésálló műanyagból. Lapos betétek (Sz x Mé x Ma): 41 x 30,9 x 2,5 cm.

Mély betétek (Sz x Mé x Ma): 41 x 30,9 x 8,0 cm.

lapos:			
298 096	típus 251	1 db	15.995
298 097	típus 253	1 db	15.995
298 090	típus 254	1 db	15.995
298 091	típus 258	1 db	15.995
298 092	típus 260	1 db	15.995
mély:			
298 093	típus 262	1 db	18.795
298 094	típus 266	1 db	18.795
298 095	típus 267	1 db	18.795
298 098	típus 265	1 db	18.795



251



253



254



258



260



262



266



267



265